

Human TGF- β 1 ELISA 试剂盒

产品编号# CHE0029 (48/96 孔)

适用于人血清、血浆或细胞培养上清液等样本

仅供研究，不用于临床诊断。



客服热线: 400-7060-959 * 技术支持邮箱: tech@4abio.com
公司官网: www.4abio.net

目录

简介	- 3 -
检测原理	- 3 -
试剂盒组分	- 4 -
储存条件	- 5 -
其他实验材料	- 5 -
注意事项	- 5 -
样本收集处理及保存方法	- 6 -
试剂准备	- 6 -
操作步骤	- 8 -
操作流程图	- 9 -
操作要点提示	- 9 -
结果判断	- 9 -
结果重复性	- 10 -
灵敏度	- 10 -
特异性	- 11 -
参考文献	- 11 -

 该产品由北京四正柏生物科技有限公司研制。

 请根据试剂盒中所附说明书指引进行实验。

简介

转化生长因子 β (TGF- β)是调节细胞生长和分化的 TGF- β 超家族。这一家族除 TGF- β 1 至 TGF- β 5 外, 还有活化素、抑制素、缪勒氏管抑制物质(MIS)和骨形成蛋白(BMPs)。TGF- β 是根据这种细胞因子能使正常的成纤维细胞的表型发生转化而命名的。

一般在细胞分化活跃的组织常含有较高水平的 TGF- β , 如成骨细胞、肾脏、骨髓和胎肝的造血细胞。TGF- β 1 在人血小板和哺乳动物骨中含量最高。TGF- β 1 以非活性状态存在, 激活时是 TGF- β 1 活性部分释放。TGF- β 1 具有激活和抑制双重功能, 在体外, TGF- β 1 的活化是对其酸化。许多 TGF- β 1 受体调节其生物活性, 有受体 I(53-65KD), 受体 II(83-110KD), 受体 III(250-310KD), 受体 IV(60KD), 受体 V(400KD)。

TGF- β 是由两个结构相同或相近的、分子量为 12.5kDa 亚单位借二硫键连接成的二聚体。人 TGF- β cDNA 序列研究表明, 单体的 TGF- β 112 氨基酸残基是由含 400 氨基酸残基的前体分子从羧基端裂解而来。人 TGF- β 1 基因定位于 19 染色体上, 含有 7 个外显子。人和小鼠 TGF- β 1 的同源性高达 99%, 不同种属中 TGF- β 都具有重要的生物学功能。

TGF- β 的生物学功能主要在炎症、组织修复和胚胎发育等方面, TGF- β 对细胞的生长、分化和免疫功能都有重要的调节作用。

TGF- β 抑制免疫活性细胞的增殖; 对细胞表型进行调节; 抑制淋巴细胞的分化; 抑制细胞因子产生: 如抑制 PBMC 中 IFN- γ 和 TNF- α 的产生; TGF- β 1 可诱导或抑制原癌基因表达; 其它调节作用: ①促进成纤维细胞、成骨细胞和雪旺氏细胞的生长。TGF- β 1、TGF- β 2 促进人成纤维细胞 IL-6 的产生, 其机理可能是通过对 IL-6 基因转录的调节。②抑制上皮细胞、破骨细胞、内皮细胞生长和脂肪、心肌、骨骼肌的形成。TGF- β 可拮抗 EGF 的某些生物学功能。③促进细胞外基质(ECM)如胶原蛋白、纤粘连蛋白的表达和抑制 ECM 的降解, 对细胞的形态发生、增殖和分化过程起着重要作用, 有利于胚胎发育和细胞修复。动物体内实验表明, 局部注射 TGF- β 可以促进伤口愈合和典型肉芽组织形成。④单核细胞和成纤维细胞的趋化剂, 但不引起脱颗粒和氧化物的产生。⑤抑制淋巴细胞与内皮细胞的粘附。⑥促进嗜碱性粒细胞释放组织胺。

TGF- β 在治疗伤口愈合, 促进软骨和骨修复以及通过免疫抑制治疗自身免疫性疾病和移植排斥等方面有潜在的应用前景。

检测原理

本实验采用双抗体夹心 ELISA。用抗人 TGF- β 1 单克隆抗体预包被酶标板, 加入适度稀释的样本和标准品, 其中的 TGF- β 1 会与其单抗结合, 洗去游离成分; 加入生物素化的抗人 TGF- β 1 抗体, 抗人 TGF- β 1 抗体与结合在单抗上的人 TGF- β 1 结合而形成免疫复合物, 洗去游离的成分; 加入辣根过氧化物酶标记的亲合素, 生物素与亲合素特异性结合, 洗去未结合的酶结合物; 加入显色剂, 若反应孔中有 TGF- β 1, 辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色; 加终止液变黄。在 450nm 下测 OD 值, TGF- β 1 浓度与 OD450 值之间呈正比, 可通过绘制标准曲线计算出标本中 TGF- β 1 浓度。



检测原理示意图

试剂盒组分

试剂盒组分	96 孔	48 孔	配制
1a 标准品	2 支	1 支	按说明书进行稀释
1b 标准品和标本稀释液	4 瓶	2 瓶	即用型
2a 浓缩生物素化抗体	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
2b 生物素化抗体稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
3a 浓缩酶结合物（避光）	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
3b 酶结合物稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
1N HCL	1 支	1 支	即用型
1N NaOH	1 支	1 支	即用型
4 浓缩洗涤液 20×	1 瓶	1 瓶	按瓶签标识进行稀释
显色剂（避光）	1 瓶	1 瓶	即用型
终止液	1 瓶	1 瓶	即用型
抗体包被板条	8×12	8×6	即用型
封板胶纸	4 张	2 张	即用型
说明书	1 份	1 份	

如果您收到试剂盒后发现上表中有任何组分破损或缺失,请及时联系我司客服 400-7060-959 或 tech@4abio.com。我们将及时为您解决相关问题。

储存条件

未启封的试剂盒	4℃保存，请于保质期内使用。	
已启封或重新溶解的试剂	1b 标准品和标本稀释液	可以整盒放入 4℃储存 1 个月。 2a 浓缩生物素化抗体和 3a 浓缩酶结合物需用现配。
	2a 浓缩生物素化抗体 (100×)	
	2b 生物素化抗体稀释液	
	3a 浓缩酶结合物 (避光 100×)	
	3b 酶结合物稀释液	
	4 浓缩洗涤液 20×	
	显色剂 (避光)	
	终止液	4℃或常温保存
	标准品	重溶后分装，-20℃存放一个月，避免反复冻融。稀释后的标准品使用后应丢弃，不得重复使用。
抗体包被板条	实验中不用的板条应立即放回包装袋中，密封干燥 4℃保存。	

以上储存条件均要求在试剂盒保质期内。

其他实验材料 (不提供，但可协助购买)：

1. 酶标仪(450nm)
2. 高精度可调移液器及吸头: 0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000μl; 一次检测样品较多时，最好用多通道移液器。
3. 自动洗板机或洗瓶
4. 37℃温箱
5. 双蒸水或去离子水
6. 坐标纸
7. 量筒

注意事项

1. 试剂盒保存在2-8℃，除复溶后的标准品，其它成分不可冷冻。
2. 浓缩生物素化抗体(2a)、浓缩酶结合物(3a)装量极少，运输中颠簸和可能的倒置会使液体沾到管壁或瓶盖。使用前请离心处理以使附着于管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
3. 为避免交叉污染请使用一次性吸头。
4. 终止液和显色剂具腐蚀性，避免皮肤及粘膜直接接触，一旦接触到这些液体，请尽快用大量水冲洗。
5. 使用干净的塑料容器配制洗涤液，使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
6. 洗涤酶标板时应充分拍干，不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。

7. 不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分，不同批号的试剂盒组份不能混用，请在有效日期内使用本产品。
8. 在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔，加入试剂的顺序应一致，以保证所有反应孔孵育的时间一样。
9. 充分混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。
10. 避免操作过程中酶标板干燥，干燥会使酶标板上生物成分迅速失活，影响实验结果。
11. 适当的稀释样品，使样品值落在标准曲线范围内，根据待测因子含量高、中、低的不同，建议采用1:100, 1:10, 1:2稀释样品。如果样品OD值高于最高标准，适当增加稀释度并重复检测。
12. 标准品稀释液、操作人、移液方式、洗涤方法、孵育时间及温度、试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差异。
13. 此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。


样本收集处理及保存方法

1. **血清**：使用不含热原和内毒素的试管，收集血液后，室温凝血30min，1000×g离心10min，小心分离血清。
2. **血浆**：用EDTA、柠檬酸盐、肝素作为抗凝剂收集血浆，收集后30min内以1000×g离心15min去除颗粒。
3. **细胞上清液**：1000×g离心10min去除颗粒和聚合物。
4. **保存**：若样品不立即检测，请将其按一次用量分装，-20℃-70℃保存，避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒，检测前先离心或过滤去除；室温下解冻，请勿于37℃或更高的温度加热解冻。
5. **稀释**：可根据实际情况，将标本做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数)。
注：正常人血清或血浆样本建议做1:2稀释。

试剂准备

1. 提前30min从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温。
2. **洗涤缓冲液**：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，这属于正常现象，加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4℃。
3. **标准品**：加入标准品/标本稀释液(1b)0.5ml至冻干标准品(1a)中，待彻底溶解后，静置15分钟混匀(浓度为4000pg/ml)，然后根据需要进行稀释，见下图(建议标准曲线使用以下浓度：4000、2000、1000、500、250、125、62.5、0 pg/ml)。稀释的标准品不得重复使用，未用完的标准品应按照一次用量分装后，将其放在-20~-70℃贮存，一次性使用，避免反复冻融。

标准品稀释方法：

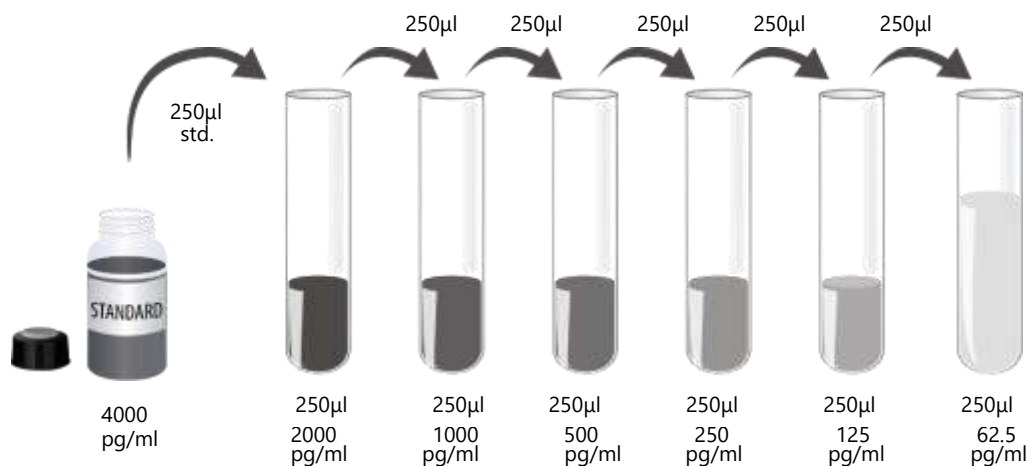

4. **生物素化抗体工作液：**根据每孔需要100µl来计算总的用量，多配制100-200µl。以生物素化抗体稀释液(2b)稀释浓缩生物素化抗体(2a)(1:100)。最好现用现配。（稀释方法参照下表）

所用板条数	浓缩生物素化抗体	+	生物素化抗体稀释液
12	110µL	+	10890µL
10	90µL	+	8910µL
8	70µL	+	6930µL
6	50µL	+	4950µL
4	33µL	+	3267µL
2	17µL	+	1683µL
1	9µL	+	891µL

5. **酶结合物工作液：**以酶结合物稀释液(3b) 稀释浓缩酶结合物(3a)(1:100)。最好现用现配。（稀释方法参照下表）

所用板条数	浓缩酶结合物	+	酶结合物稀释液
12	110µL	+	10890µL
10	90µL	+	8910µL
8	70µL	+	6930µL
6	50µL	+	4950µL
4	33µL	+	3267µL
2	17µL	+	1683µL
1	9µL	+	891µL

6. 标本预处理：

血清或血浆标本激活方法：

1. 在225µl标准品/标本稀释液(1b)中，加入5µl血清或血浆标本。
2. 加10µl 1 N HCl，盖紧，上下混匀。2 - 8°C放置60 ± 2分钟。

- 3). 加10 μ l 1 N NaOH, 盖紧, 上下混匀。(总体积250 μ l即50倍稀释)
 - 4). 即用, 或置-20/-70 $^{\circ}$ C可保存3天。计算结果时应乘以稀释倍数。
- (注意: 不同的标本TGF- β 1的水平可能有较大差异, 请根据实际情况灵活掌握稀释度)


细胞培养上清标本激活方法:

- 1). 在80 μ l标准品/标本稀释液(1b)中, 加入100 μ l标本。
 - 2). 加10 μ l 1N HCl, 盖紧, 上下混匀。2-8 $^{\circ}$ C放置60 \pm 2分钟。
 - 3). 加10 μ l 1N NaOH, 盖紧, 上下混匀。(总体积200 μ l即2倍稀释)。
 - 4). 即用, 或置-20/-70 $^{\circ}$ C可保存3天。计算结果时应乘以稀释倍数。
- (注意: 不同的标本TGF- β 1的水平可能有较大差异, 请根据实际情况灵活掌握稀释度)

操作步骤

1. 按照上述准备工作配制好各种溶液。
2. 根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数, 并增加1孔作为空白对照孔。分别将标本和不同浓度标准品(100 μ l /孔)加入相应孔中 (零孔只加标准品/样本稀释液), 用封板胶纸封住反应孔, 37 $^{\circ}$ C孵箱孵育90分钟 (空白对照孔除外)。
3. 洗板4次: (1)自动洗板机: 要求注入的洗涤液为350 μ l, 注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板: 甩尽孔内液体, 每孔加洗涤液350 μ l, 静置30秒后甩尽液体, 在厚透吸水纸上拍干。
4. 加入生物素化抗体工作液(100 μ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔, 37 $^{\circ}$ C孵箱孵育60分钟(空白对照孔除外)。
5. 洗板4次。
6. 加入酶结合物工作液(100 μ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔, 37 $^{\circ}$ C孵箱孵育30分钟 (空白对照孔除外)。
7. 洗板4次。
8. 加入显色剂100 μ l /孔, 避光, 37 $^{\circ}$ C孵箱孵育10-20分钟。
9. 加入终止液100 μ l /孔, 混匀后即刻测量OD450值(5分钟内)。

操作流程图

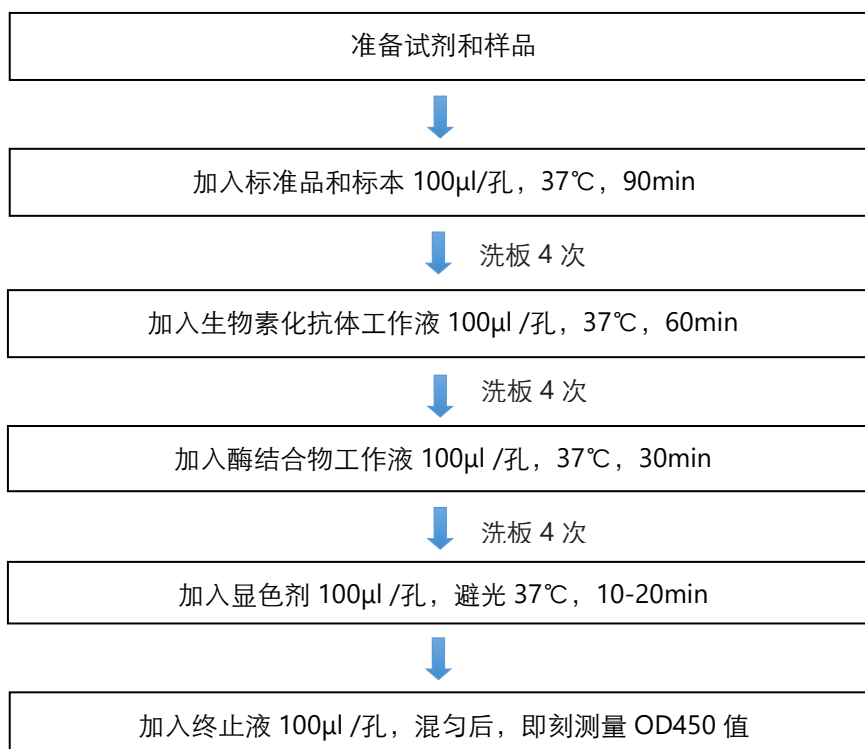

操作要点提示

1. 配制各种试剂时要充分混匀，但要避免产生大量泡沫，以免加样时加入大量的气泡，产生加样误差。
2. 为避免交叉污染，在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
3. 为了确保准确的结果，在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。
4. 显色剂在添加之前，应保持无色，请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要，肉眼可见前 3-4 孔有梯度蓝色，后 3-4 孔差别不明显，零孔无蓝色出现即可终止。
5. 每次检测均要做标准曲线，根据样品待测因子的含量，适当稀释或浓缩样本，最好做预实验。


结果判断

1. 每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值，如果做复孔，求其平均值。
2. 使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标(Y)，相应的TGF-β1标准品浓度为横坐标(X)，生成相应的标准曲线，样品的TGF-β1含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。

3. 若标本 OD 值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。
4. 参考数据：

标准品浓度(pg/ml)	OD值1	OD值2	平均值	矫正值
0	0.087	0.083	0.085	—
62.5	0.179	0.183	0.181	0.096
125	0.275	0.267	0.271	0.186
250	0.381	0.389	0.385	0.300
500	0.636	0.342	0.639	0.554
1000	1.028	1.020	1.024	0.939
2000	1.615	1.627	1.621	1.536
4000	2.366	2.360	2.363	2.278

数据仅供参考，不同用户最佳显色时间会有所不同

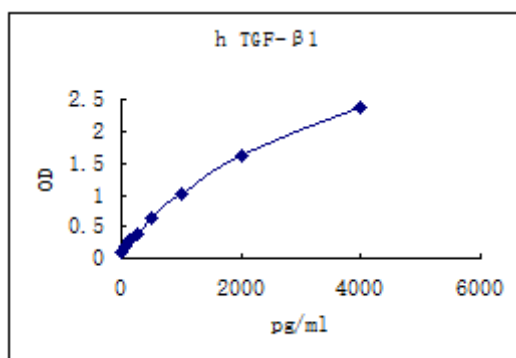

本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线为准

结果重复性

板间，板内变异系数均<10%。

灵敏度

最低检测人 TGF-β1 剂量小于 31pg/ml。最低检出量测定方法：20 个零标准的平均 OD 值增加两个标准差，再计算相应的浓度。

特异性

此试剂盒可检测天然和重组的人TGF- β 1，以100ng/ml平行做特异性试验，均不与下列细胞因子及蛋白反应。

重组人细胞因子	重组小鼠细胞因子	其他蛋白
Activin A	BMP-3b	Natural porcine TGF- β 2
Activin RIA	BMPR-IA	
Activin RIIA	BMPR-IB	
Activin RIIB	TGF- β RI	
BMP-2		
BMP-3		
BMP-3b		
BMP-4		
BMP-5		
BMP-6		
BMP-8b		
BMP-10		
BMP-15		
BMP-2		
TGF- β 2		
TGF- β 3		
TGF- α		

参考文献

1. Kingsley, D.M. (1994) Genes Dev. 8:133.
2. Gleizes, P-E. et al. (1997) Stem Cells 15:190.
3. Ten Dijke, P. et al. (1996) Curr. Opin. Cell Biol. 8:139.
4. Derynck, R. and X-H. Feng (1997) Biochem. Biophys. Acta 1333:F105.
5. Padgett, R.W. et al. (1998) BioEssays 20:382.
6. Lawrence, D.A. (1996) Eur. Cytokine Netw. 7:363.
7. Cox, D.A. and T. Maurer (1997) Clin. Immunol. Immunopathol. 83:25.
8. Alevizopoulos, A. and N. Mermoud (1997) BioEssays 19:581.
9. Dubois, C.M. et al. (1995) J. Biol. Chem. 270:10618.
10. Letterio, J.J. et al. (1997) Clin. Immunol. Immunopathol. 84:244.