

Mouse IgA ELISA 试剂盒

产品编号#CME0058(48/96 孔)

适用于小鼠血清、血浆或细胞培养上清液等样本

仅供研究，不用于临床诊断。



客服热线: 400-7060-959 * 技术支持邮箱: tech@4abio.com
公司官网: www.4abio.com

目录

简介	- 3 -
检测原理	- 3 -
试剂盒组分	- 4 -
储存条件	- 4 -
其他实验材料 (不提供, 但可协助购买) :	- 5 -
注意事项	- 5 -
样本收集处理及保存方法	- 5 -
试剂准备	- 6 -
操作步骤	- 7 -
操作流程图	- 7 -
操作要点提示	- 8 -
结果判断	- 8 -
结果重复性	- 9 -
灵敏度	- 9 -
特异性	- 9 -
参考文献	- 9 -

 该产品由北京四正柏生物科技有限公司研制。


 请根据试剂盒中所附说明书指引进行实验。

简介

IgA 在正常血清中含量约为 10~20%。从结构来看, IgA 有单体、双体、三体及多聚体之分。按其免疫功能又分为血清型及分泌型两种。血清型 IgA 主要以单体形式存在于血清中, 其含量占总 IgA 的 85%左右, 可介导调理吞噬 ADCC 作用。分泌型 IgA 则是由 J 链链接的二聚体和分泌片组成, 存在于胃肠道和支气管分泌液中、唾液、泪液、初乳中。分泌型 IgA 是机体粘膜局部抗感染免疫的主要抗体; 在粘膜表面也有中和毒素的作用。新生儿易患呼吸道、胃肠道感染可能与 IgA 的合成不足有关, 可从母乳中获得分泌型 IgA, 这是一种重要的自然被动免疫。一旦外来抗原进入呼吸道或消化道, 局部免疫系统受到刺激后, 无需中央免疫系统的参与, 自身就可进行免疫应答, 产生分泌型抗体。本试剂盒适用于小鼠中免疫球蛋白 A 的检测。

检测原理

本实验采用双抗体夹心 ELISA。用抗小鼠 IgA 单克隆抗体预包被酶标板, 加入适度稀释的样本和标准品, 其中的 IgA 会与其单抗结合, 洗去游离成分; 加入酶标抗体, 酶标抗体与结合在单抗上的小鼠 IgA 结合而形成免疫复合物, 洗去未结合的酶标抗体; 加入显色剂, 若反应孔中有 IgA, 辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色; 加终止液变黄。在 450nm 下测 OD 值, IgA 浓度与 OD450 值之间呈正比, 可通过绘制标准曲线计算出标本中 IgA 浓度。

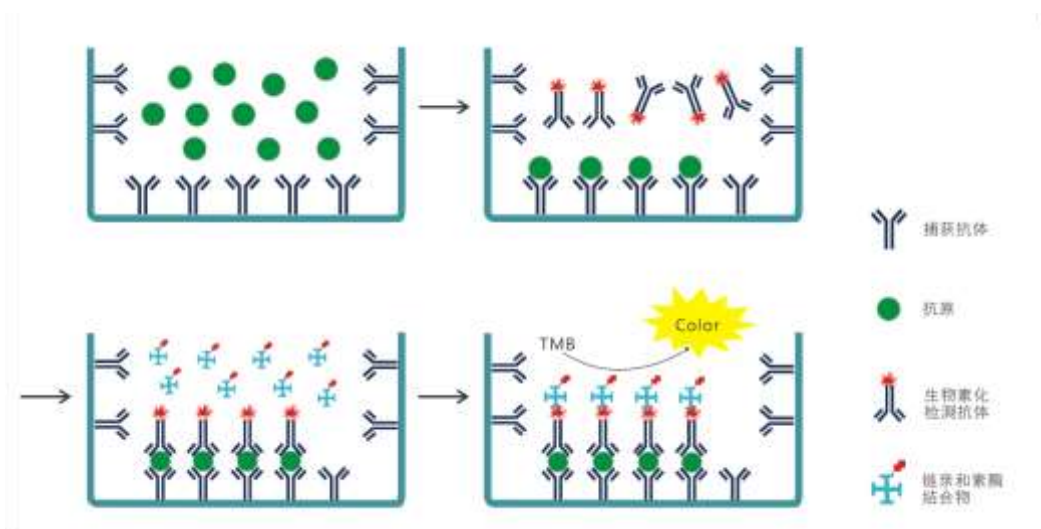

检测原理示意图

试剂盒组分

试剂盒组分	96 孔	48 孔	配制
1a 标准品	2 支	1 支	按说明书进行稀释
1b 标准品和标本稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
3a 浓缩酶标抗体（避光）	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
3b 酶标抗体稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
4 浓缩洗涤液 20×	1 瓶	1 瓶	按瓶签标识进行稀释
显色剂（避光）	1 瓶	1 瓶	即用型
终止液	1 瓶	1 瓶	即用型
抗体包被板条	8×12	8×6	即用型
封板胶纸	4 张	2 张	即用型
说明书	1 份	1 份	

如果您收到试剂盒后发现上表中有任何组分破损或缺失,请及时联系我司客服 400-7060-959 或 tech@4abio.com。我们将及时为您解决相关问题。

储存条件

未启封的试剂盒		4℃保存，请于保质期内使用。
已 启 封 或 重 新 溶 解 的 试 剂	1b 标准品和标本稀释液	可以整盒放入 4℃储存 1 个月。
	3a 浓缩酶标抗体（避光）	
	3b 酶标抗体稀释液	
	4 浓缩洗涤液 20×	3a 浓缩酶标抗体需现用现配。
	显色剂（避光）	
	终止液	4℃或常温保存
	标准品	重溶后分装，-20℃存放一个月，避免反复冻融。稀释后的标准品使用后应丢弃，不得重复使用。
	抗体包被板条	实验中不用的板条应立即放回包装袋中，密封干燥 4℃保存。

以上储存条件均要求在试剂盒保质期内。

其他实验材料 (不提供, 但可协助购买):

1. 酶标仪(450nm)
2. 高精度可调移液器及吸头: 0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000 μ l; 一次检测样品较多时, 最好用多通道移液器。
3. 自动洗板机或洗瓶
4. 37℃温箱
5. 双蒸水或去离子水
6. 坐标纸
7. 量筒

注意事项

1. 试剂盒保存在2-8℃, 除复溶后的标准品, 其它成分不可冷冻。
2. 浓缩生物素化抗体(2a)、浓缩酶结合物(3a)装量极少, 运输中颠簸和可能的倒置会使液体沾到管壁或瓶盖。使用前请离心处理以使附着于管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
3. 为避免交叉污染请使用一次性吸头。
4. 终止液和显色剂具腐蚀性, 避免皮肤及粘膜直接接触, 一旦接触到这些液体, 请尽快用大量水冲洗。
5. 使用干净的塑料容器配制洗涤液, 使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
6. 洗涤酶标板时应充分拍干, 不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
7. 不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分, 不同批号的试剂盒组份不能混用, 请在有效日期内使用本产品。
8. 在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔, 加入试剂的顺序应一致, 以保证所有反应孔孵育的时间一样。
9. 充分混匀对反应结果尤为重要, 最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。
10. 避免操作过程中酶标板干燥, 干燥会使酶标板上生物成分迅速失活, 影响实验结果。
11. 适当的稀释样品, 使样品值落在标准曲线范围内, 根据待测因子含量高、中、低的不同, 建议采用1:100, 1:10, 1:2稀释样品。如果样品OD值高于最高标准, 适当增加稀释度并重复检测。
12. 标准品稀释液、操作人、移液方式、洗涤方法、孵育时间及温度、试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差异。
13. 此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。

样本收集处理及保存方法


1. **血清**: 使用不含热原和内毒素的试管, 收集血液后, 室温凝血30min, 1000 $\times$ g离心10min, 小心分离血清。
2. **血浆**: 用EDTA、柠檬酸盐、肝素作为抗凝剂收集血浆, 收集后30min内以1000 $\times$ g离心15min去除颗粒。

3. **细胞上清液**：1000×g离心10min去除颗粒和聚合物。
4. **保存**：若样品不立即检测，请将其按一次用量分装，-20℃-70℃保存，避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒，检测前先离心或过滤去除；室温下解冻，请勿于37℃或更高的温度加热解冻。
5. **稀释**：可根据实际情况，将标本做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数)。
注：正常小鼠血清或血浆样本建议做1:2稀释。

试剂准备

1. 提前30min从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温。
2. **洗涤缓冲液**：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，这属于正常现象，加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4℃。
3. **标准品**：加入标准品/标本稀释液(1b)0.5 ml至冻干标准品(1a)中，待彻底溶解后，静置15分钟混匀(浓度为20000pg/ml)，然后根据需要进行稀释，见下图(建议标准曲线使用以下浓度：20000、10000、5000、2500、1250、625、312.5、0 pg/ml)。稀释的标准品不得重复使用，未用完的标准品应按照一次用量分装后，将其放在-20~-70℃贮存，一次性使用，避免反复冻融。

标准品稀释方法：

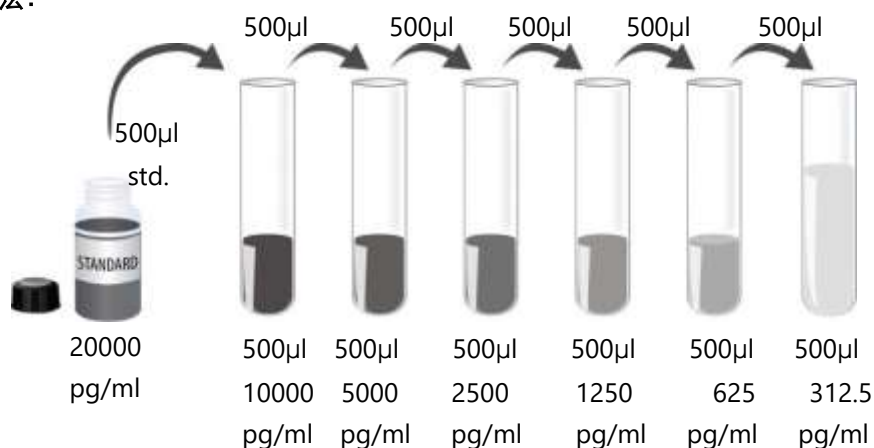


4. **酶结合物工作液**：以酶标抗体稀释液(3b) 稀释浓缩酶标抗体(3a)(1:100)。最好现用现配。（稀释方法参照下表）

所用板条数	浓缩酶标抗体		浓缩酶标抗体稀释液
12	110 µL	+	10890 µL
10	90 µL	+	8910 µL
8	70 µL	+	6930 µL
6	50 µL	+	4950 µL
4	33 µL	+	3267 µL
2	17 µL	+	1683 µL
1	9 µL	+	891 µL

操作步骤

1. 按照上述准备工作配制好各种溶液。
2. 根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数，并增加1孔作为空白对照孔。分别将标本和不同浓度标准品(100 μ l /孔)加入相应孔中。用封板胶纸封住反应孔（零孔只加标准品/样本稀释液），室温孵育120分钟（空白对照孔除外）。充分混匀对反应结果尤为重要，要使用微量振荡器(最低频率700rpm)。
3. 洗板4次：(1)自动洗板机：要求注入的洗涤液为350 μ l，注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板：甩尽孔内液体，每孔加洗涤液350 μ l，静置30秒后甩尽液体，在厚迭吸水纸上拍干。
4. 加入酶标抗体工作液(100 μ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔，室温孵育60分钟（空白对照孔除外）。充分混匀对反应结果尤为重要，要使用微量振荡器(最低频率700rpm)。
5. 洗板4次。
6. 加入显色剂100 μ l /孔，避光，室温孵育20-25分钟。
7. 加入终止液100 μ l /孔，混匀后即刻测量OD450值(5分钟内)。

操作流程圖

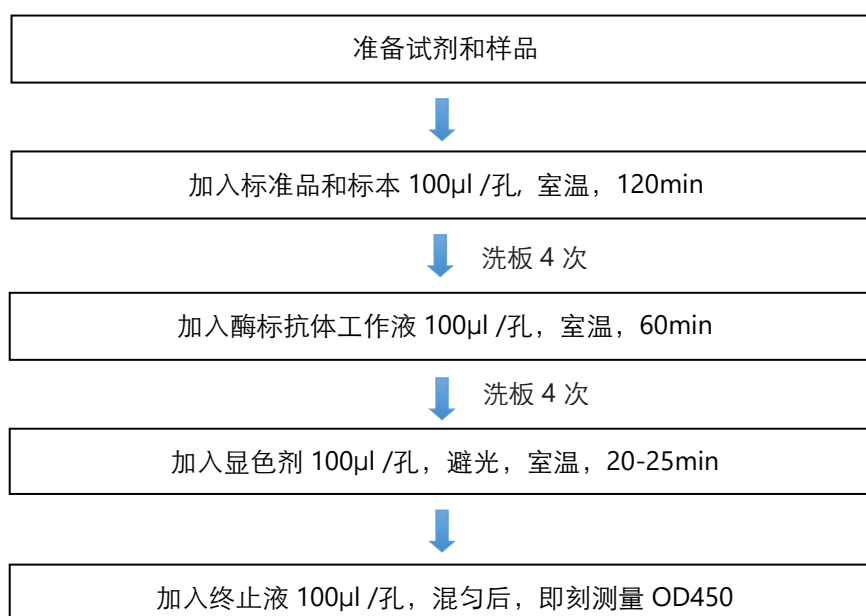


操作要点提示

- 1. 配制各种试剂时要充分混匀，但要避免产生大量泡沫，以免加样时加入大量的气泡，产生加样误差。
- 2. 为避免交叉污染，在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
- 3. 为了确保准确的结果，在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。
- 4. 显色剂在添加之前，应保持无色，请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要，肉眼可见前 3-4 孔有梯度蓝色，后 3-4 孔差别不明显，零孔无蓝色出现即可终止。
- 5. 每次检测均要做标准曲线，根据样品待测因子的含量，适当稀释或浓缩样本，最好做预实验。

结果判断

- 1. 每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值，如果做复孔，求其平均值。
- 2. 使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标(Y)，相应的IgA标准品浓度为横坐标(X)，生成相应的标准曲线，样品的IgA含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。
- 3. 若标本 OD 值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。
- 4. 参考数据：

标准品浓度(pg/ml)	OD值1	OD值2	平均值	矫正值
0	0.080	0.076	0.078	——
312.5	0.107	0.101	0.104	0.026
625	0.160	0.153	0.157	0.079
1250	0.259	0.250	0.255	0.177
2500	0.531	0.519	0.525	0.477
5000	1.012	1.001	1.007	0.929
10000	1.801	1.699	1.750	1.672
20000	2.417	2.302	2.360	2.282

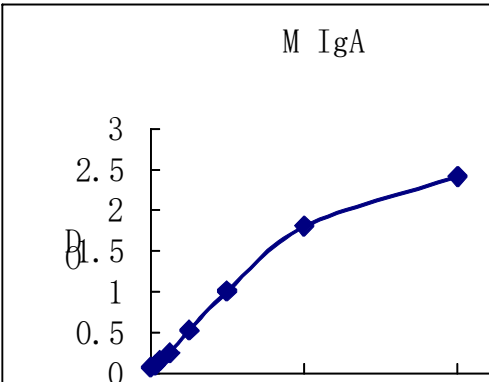

本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线为

结果重复性

板间，板内变异系数均<10%。

灵敏度

最低检测小鼠 IgA 剂量小于 150pg/ml。最低检出量测定方法：20 个零标准的平均 OD 值增加两个标准差，再计算相应的浓度。

特异性

此试剂盒可检测天然和重组的小鼠IgA，以50ng/ml平行做特异性试验，均不与下列细胞因子及蛋白反应。

重组小鼠细胞因子
IL-1 α
IL-1 β

参考文献

1. O-linked glycosylation determines the nephritogenic potential of IgA rheumatoid factor. Kihara M, et al. J Am Soc Nephrol, 2014 Jun.
2. Non-invasive bioluminescence imaging to monitor the immunological control of a plasmablastic lymphoma-like B cell neoplasia after hematopoietic cell transplantation. Chopra M, et al. PLoS One, 2013.
3. Inhibitory effect of HIV-specific neutralizing IgA on mucosal transmission of HIV in humanized mice. Hur EM, et al. Blood, 2012 Nov 29.
4. Age, microbiota, and T cells shape diverse individual IgA repertoires in the intestine. Lindner C, et al. J Exp Med, 2012 Feb 13.
5. [Aberrant glycosylation of immunoglobulin A and renal disease]. Asano M. Tanpakushitsu Kakusan Koso, 2008 Sep.